



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ

**IN 27476 Bederní pás s infračerveným světlem inSPORTline
Marolino**



SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
SPECIFIKACE.....	3
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	4
POPIS PRODUKTU	4
POUŽITÍ.....	4
NAPÁJENÍ.....	4
OVLADAČ	5
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	6

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Manuál si přečtete pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Dodržujte veškerá varování a doporučení. Nedodržením se vystavujete riziku úrazu nebo poškození výrobku.
- Produkt používejte pouze v souladu s manuálem. Nesprávné použití může vést k vážnému zranění. Neprovádějte neschválené modifikace výrobku.
- Před spuštěním je nutné si pás nasadit. Před odejmutím pásu je potřeba jej vypnout.
- Nepoužívejte nepřetržitě déle jak 30 min. Mezi použitím je nutné počkat alespoň 2 hodiny.
- Produkt nepoužívejte, pokud máte vlhké nebo mokré ruce. Nasazujte pás na čisté oblečení nebo čistou a suchou pokožku.
- Nepoužívejte na oblast hlavy nebo očí.
- Během použití nemějte nasazené šperky a pásky.
- Před skladováním a transportem je nutné odpojit ovladač a zdroj napájení.
- Během použití nezakrývejte pás polštářem nebo přikrývkou. Teplo se může nahromadit a poškodit produkt nebo způsobit poranění.
- Držte mimo zdroje tepla a ohně.
- Zařízení není voděodolné. Držte mimo zdroje vody. Neponořujte do vody.
- Nezapojte do elektrického proudu, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- Po použití je potřeba zařízení vypnout a odpojit z napájení.
- Kabely a pás držte mimo dosah krku a hlavy.
- Pouze pro vnitřní použití. Držte mimo dosah vody a vlhkých místností.
- Nedívejte se to světel, pokud nemáte nasazené ochranné brýle.
- Nepoužívejte pod vlivem drog, alkoholu a léků.
- Produkt sami neopravujte ani nemodifikujte. Poškozený produkt nepoužívejte.
- Produkt není vhodný pro těhotné ženy, osoby s citlivostí na teplo, světlo, záněty, vyrážkou, ekzémem nebo jiným onemocněním pokožky.
- Před použitím se poraďte s lékařem. Zařízení neslouží jako náhrada lékařské nebo zdravotní péče.
- Pokud pociťujete bolest nebo nevolnost, okamžitě ukončete použití a kontaktujte lékaře.

SPECIFIKACE


Počet LED	105 ks
Rozměr	130x17 cm
Hmotnost	1 kg
Vlnová délka	Červená, Blízké infračervené světlo
Jmenovitý příkon střídavého proudu	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Jmenovitý výkon stejnosměrného proudu	12V 2A
USB vstup	5V 3A nebo 5V 4 A
USB výstup	12V 1,67A
Powerbanka (není součástí balení)	5V 3A nebo 5V 4 A

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Otřete pomocí suchého měkkého hadříku. Neponořujte do vody ani jiných tekutin. Nelze dezinfikovat pomocí tekutých dezinfekcí.

Skladujte na suchém, stinném místě mimo dosah slunečního svitu a vysokých teplot.

POPIS PRODUKTU

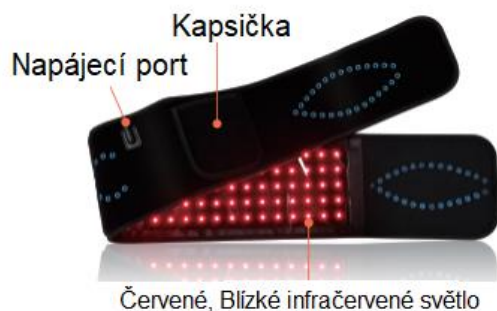

Konektor napájení pásu

Ovladač

Displej



Ovladač a kabely

Zapojení do ovladače



Zapojení do zdroje napájení

Napájecí adaptér

Zástrčka



Zapojení do ovladače

POUŽITÍ

NAPÁJENÍ

NAPÁJENÍ POMOCÍ ZÁSTRČKY

1. Zapojte ovladač do pásu.
2. Zapojte napájení do ovladače.
3. Zapojte napájení do elektrického proudu.

NAPÁJENÍ POMOCÍ USB ZDROJE

1. Zapojte ovladač do pásu.
2. Zapojte napájení do ovladače.
3. Zapojte do zdroje s USB výkonem 5V 3A nebo 5V 4A.


Varování: Pás nelze napájet pomocí 12V USB adaptéru.

NAPÁJENÍ POMOCÍ POWERBANKY

Pás lze napájet pomocí 5V powerbanky. (není součástí balení)

1. Zapojte ovladač do pásu.
2. Zapojte powerbanku k ovladači.
3. Umístěte powerbanku do kapsičky.

OVLADAČ

	Typ záření: 660 nm, 850 nm, současně oba typy
	Intenzita: L0 – L4
	Časovač: 5, 10, 15, 20, 25, 30 min
	Vypínač: Spuštěno, 10 Hz / vypnuto

Intenzita	Výkon
L0	0,9 W
L1	4,9 W
L2	8,5 W
L3	12,3 W
L4	16,0 W

Produkt můžete napájet pomocí elektrického zdroje AC 100 – 240 V, 50/60 Hz nebo pomocí USB.



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy

- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ **SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK **inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamační, servis: Električná 6471, Trenčín
911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamační zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

