



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 20368 Fitness náramek inSPORTline Oxyband




OBSAH

POUŽITÍ.....	3
STAŽENÍ A INSTALACE APLIKACE.....	3
UZAMKNUTÍ APLIKACE	6
APLIKACE V POZADÍ	7
ROZHRANÍ.....	7
TEPOVÁ FREKVENCE	8
ZPRÁVY.....	8
KREVNÍ TLAK.....	9
OKYSLIČENÍ KRVE.....	9
OSVĚTLENÍ ROZHRANÍ.....	9
NASTAVENÍ.....	9
ÚDRŽBA.....	11
NABÍJENÍ.....	11
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY / FAQ.....	11
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	11
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	12

POUŽITÍ

POPIS

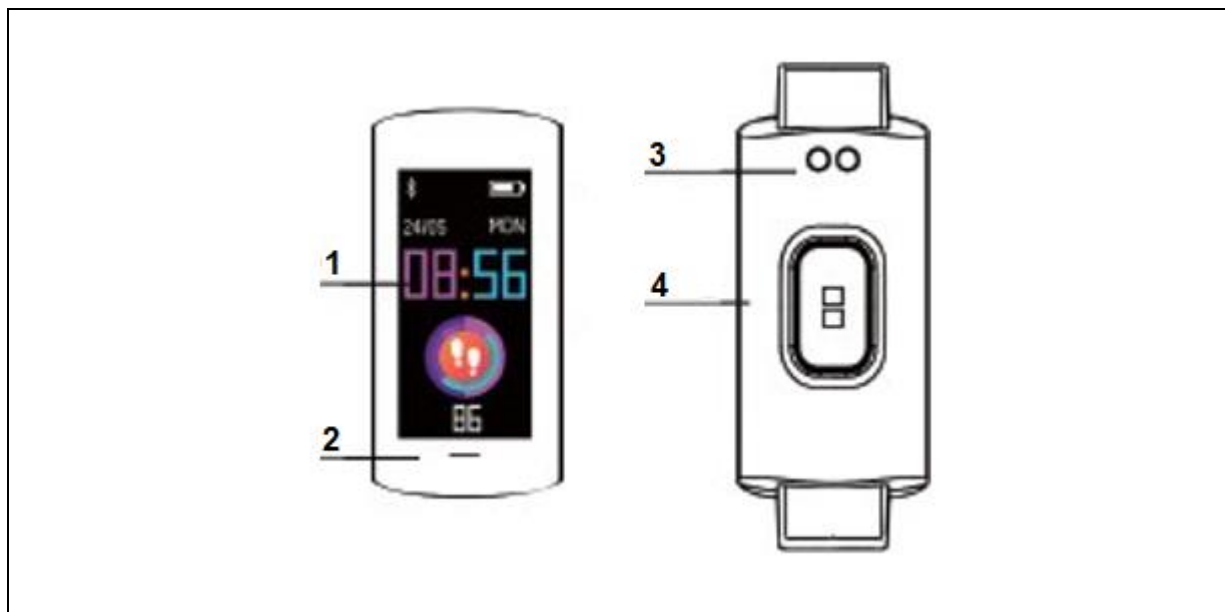

1	Displej
2	Dotykové tlačítko
3	Nabíjecí port
4	Senzor tepové frekvence

SPUŠTĚNÍ

Podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund, nebo připojte do nabíječky.

STAŽENÍ A INSTALACE APLIKACE





Systémové požadavky: Android 5.1 nebo IOS 8.0 nebo vyšší, Bluetooth 4.0 nebo vyšší

QR kód




JYouPro aplikaci můžete stáhnout i pomocí APP store pro IOS nebo Google Play pro Android.


SPÁROVÁNÍ

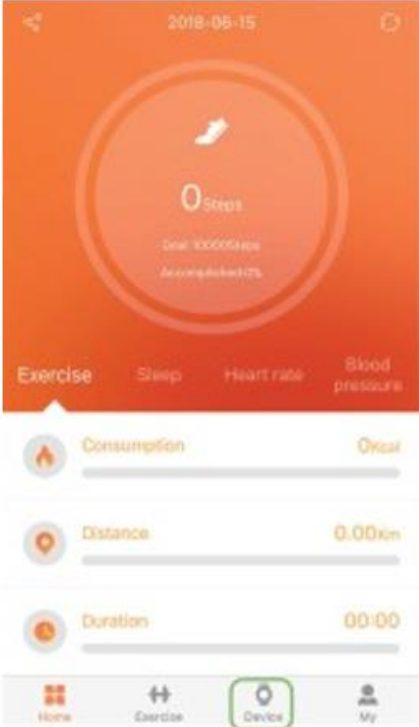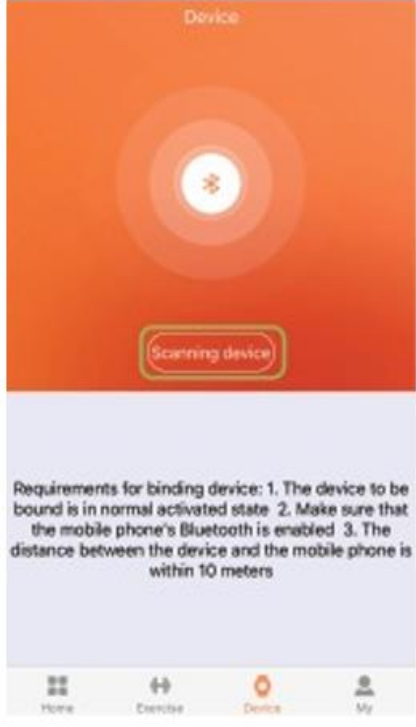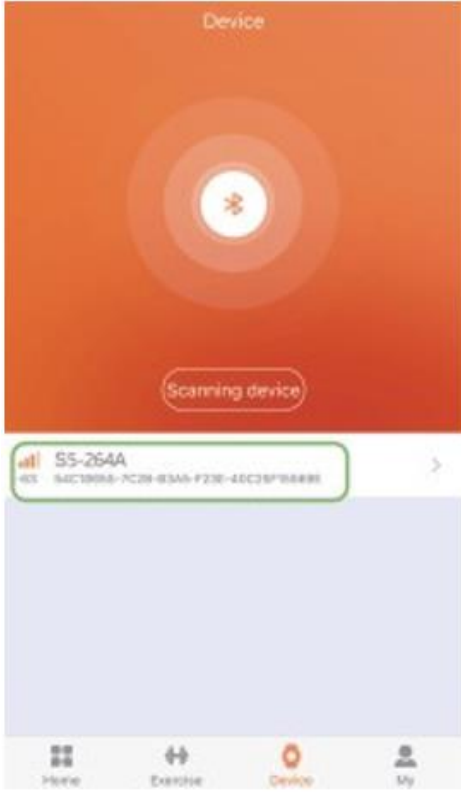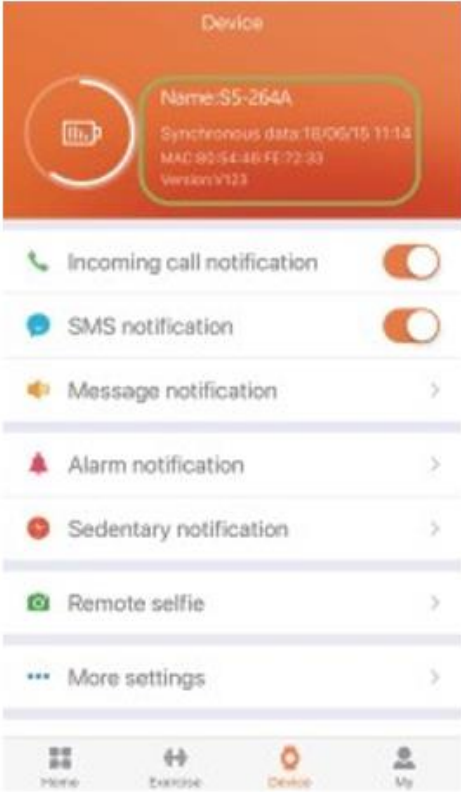	
<p>1. V mobilní aplikaci vyberte Device</p>	<p>2. Stiskněte Scan device</p>
	
<p>3. Vyberte vaše zařízení</p>	<p>4. Úspěšné spárování</p>

HOME: Domovská stránka aplikace zobrazuje a ukládá data o pohybu, spánku, tepové frekvence nebo tlaku

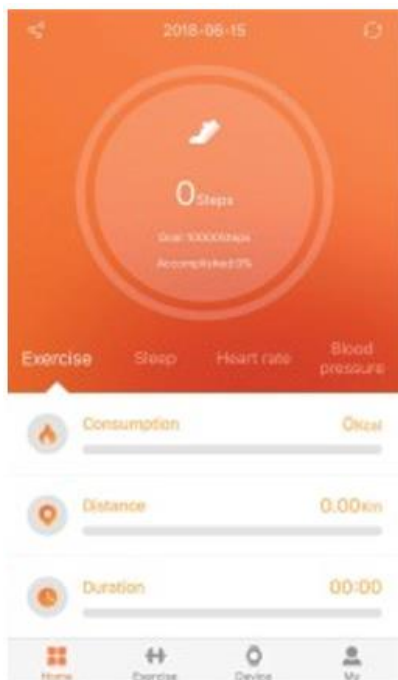


EXERCISE: Zobrazení aktuální a předchozích údajů o pohybu: chůze, běh, cyklistika, horolezectví

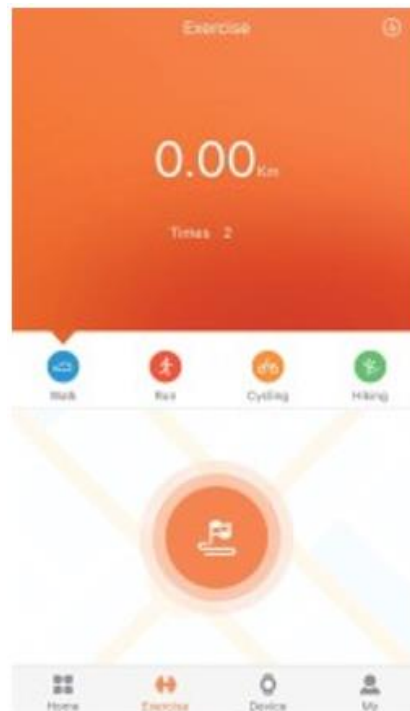

DEVICE: Spustíte Bluetooth a vyhledejte vaše zařízení



MY: Zobrazí informace spojené se zařízením

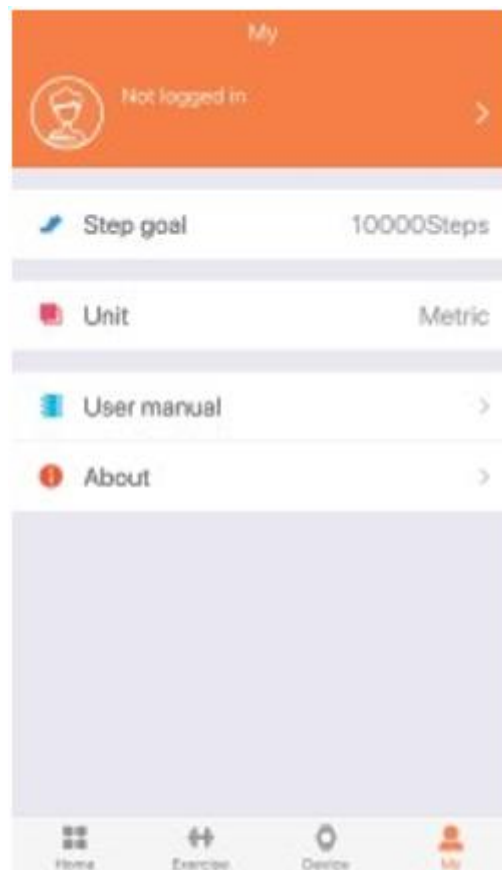

UZAMKNUTÍ APLIKACE

Pro iOS není nutné aplikaci v pozadí uzamykat, aplikace běží v pozadí, pokud není ručně vypnuta.

Pro Android je nutné aplikaci v pozadí uzamknout. Náramek se odpojí, pokud je aplikace automaticky vypnuta. Aplikaci je nutné nastavit tak, aby se nevypínala v pozadí.

1. Spustěte aplikaci.
2. Vstupte do spuštěných aplikací.
3. Nastavte zámek aplikace.
4. Aplikace by neměla být vypnuta automatickým čištěním.




APLIKACE V POZADÍ

Pro iOS není nutné další nastavení.

Pro Android je nutné nastavit aplikaci tak, aby nebyla limitována úsporou baterie.

Nastavení se liší dle značky telefonu.

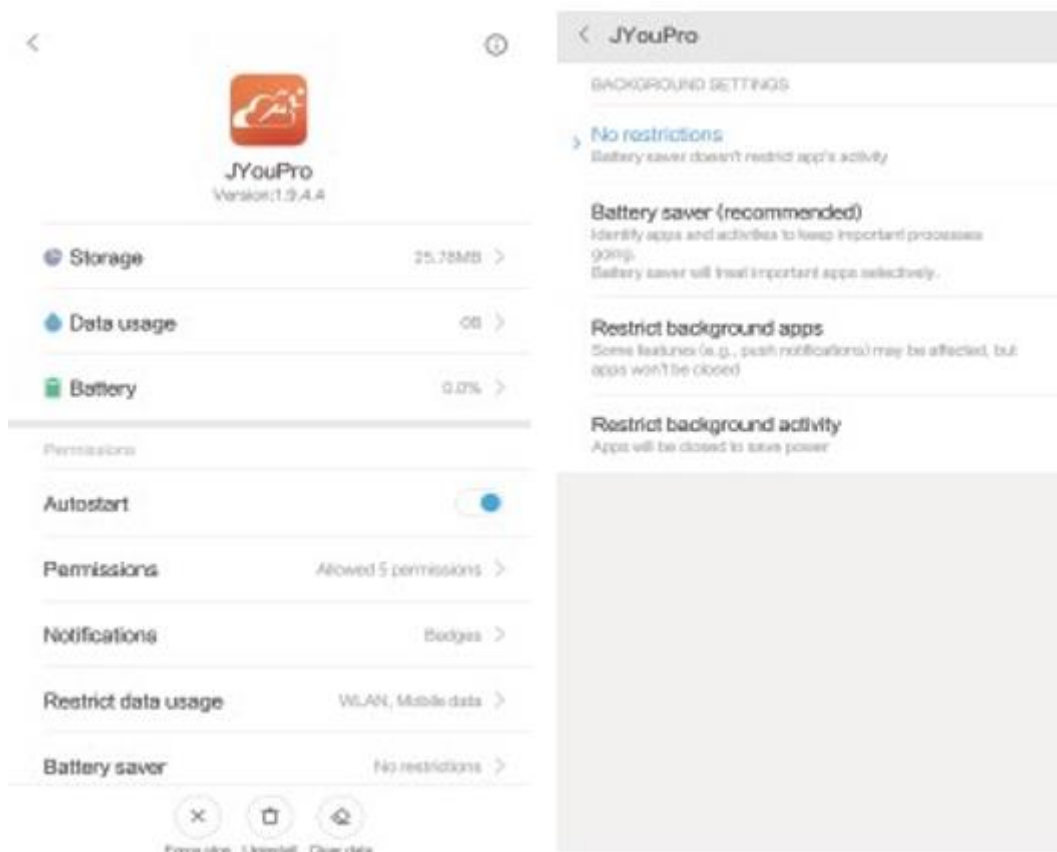

ROZHRAŇÍ

Stiskněte tlačítko pro zobrazení hlavního menu a zobrazení následujících funkcí:



Hlavní menu zobrazí čas, datum, stav baterie a spárování s Bluetooth, pokud je náramek spárován s mobilním zařízením.



Stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund, pro změnu zobrazených funkcí.

Zobrazení počet kroků, vzdálenosti a kalorií při chůzi.



Podržte tlačítko po dobu 3 sekund v rozhraní pohybu (movement) – chůze (walking), jogging, cyklistika (riding), turistika (climbing mountain), plavání (swimming). Pokud je vybraná chůze, stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení pohybu.



Poznámka: Při spuštění sportovního režimu, světlo svítí podle tepové frekvence. Zelená je pro normální tepovou frekvenci, modrá pro střední tepovou frekvenci, červená pro vysokou tepovou frekvenci (značí potřebu snížit zátěž nebo tempo).

TEPOVÁ FREKVENCE

Vstupte do rozhraní tepové frekvence a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Sledování tepové frekvence vybíjí baterii rychleji.

Senzor se musí dotýkat kůže. Pokud je náramek volný, nemusí být měření přesné. Nedívejte se přímo do světla zobrazující tepovou frekvenci.

Tepovou frekvenci začněte měřit v klidovém stavu. Uživatel by se neměl pohybovat, dokud náramek nezaznamená tepovou frekvenci.

Měřte tepovou frekvenci 5x po odpočinku.


Ujistěte se, že je senzor tepové frekvence čistý.

Měření tepové frekvence po delší dobu, může způsobit zahřívání produktu.



ZPRÁVY

Vstupte do rozhraní zpráv a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Zobrazí se hovory a maximálně 7 zpráv, další zprávy se zobrazí po přečtení aktuálních zpráv.

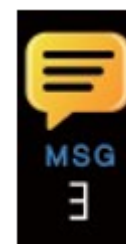

KREVNÍ TLAK

Krevní tlak by měl být měřen v klidném prostředí. Před měřením se posadte a odpočívajte minimálně 5 minut. Tlak měřte 3x v intervalu 2 minut.

VAROVÁNÍ: Údaje jsou pouze orientační a neslouží pro lékařské účely.



OKYSLIČENÍ KRVE

Zobrazí procentuální okysličení krve.

VAROVÁNÍ: Údaje jsou pouze orientační a neslouží pro lékařské účely.



OSVĚTLENÍ ROZHRAŇÍ

Vstupte do nastavení osvětlení rozhraní a podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení. Krátkým stisknutím tlačítka vyberte barvu a podržením tlačítka po dobu 3 sekund výběr potvrdíte.

ALL	Budou se střídat 3 barvy
RED	Červené rozhraní
BLUE	Modré rozhraní
GREEN	Zelené rozhraní
CLOSE / OFF	Vypne barevné osvětlení



NASTAVENÍ

Vyberte settings a dlouze stiskněte dotykové tlačítko pro vstup do nastavení.




STPOKY / STOPWATCH

Vyberte nastavení stopek a dlouze stiskněte dotykové tlačítko. Stiskem tlačítka stopky spustíte, opakovaným stisknutím tlačítka stopky zastavíte. Dlouze stiskněte tlačítko pro opuštění stopek.



NAJDI TELEFON / FIND PHONE

Vyberte funkci find phone, a zatřepejte náramkem, mobil by měl začít vyzvánět.

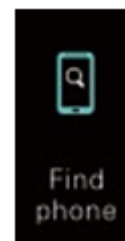


MAC ADRESA

Mac adresa zobrazuje identifikační číslo náramku. Číslo nemůže být upraveno ani změněno. Pokud máte náramek spárovaný s mobilním telefonem tak podle MAC adresy zjistíte, který náramek spárovat.




VYPNUTÍ / POWER OFF

Vstupte do power off a stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund.

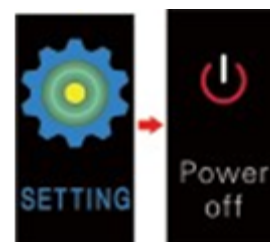

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ / RESTORING FACTORY SETTINGS

Dlouho stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund pro vyčištění všech zpráv a obnovení továrního nastavení.

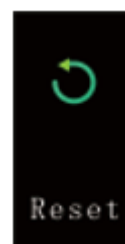

ÚDRŽBA

- Pravidelně čistěte náramek, obzvláště zadní stranu. Udržujte náramek suchý.
- Správně dotáhněte náramek.
- Nepoužívejte nadměrné množství krémů a podobných přípravků v místě nošení náramku.
- Pokud pozorujete podráždění kůže, přestaňte náramek nosit.
- Náramek je voděodolný do 1 m, odolný proti potu, dešti a sprchování. Není vhodné nosit do vody teplejší jak 42 °C.

NABÍJENÍ

Pro nabití připojte nabíječku do nabíjecího portu.



ČASTO KLADENÉ OTÁZKY / FAQ

1. Telefon nelze najít pomocí náramku.

Ujistěte se, že je náramek nabitý a zapnutý. Poté položte náramek poblíž telefonu. Pokud stále nemůžete náramek najít, restartujte Bluetooth a telefon.

2. Náramek se automaticky nepřipojil k chytrému telefonu.

Pokud je doba připojení dlouhá, ujistěte se, že připojení není rušeno jiným signálem.

Pokud se zařízení nepřipojí, restartujte telefon a Bluetooth.

3. Nedostávám upozornění z náramku o příchozích hovorech a oznámeních.

Ujistěte se, že jsou zařízení spárovaná a aplikace v mobilním telefonu běží v pozadí.

4. Náramek neměří tepovou frekvenci.

Během měření buďte v klidu. Senzor musí doléhat na kůži. Během měření nehýbejte pažemi.

5. Ikona Bluetooth bliká.

Aplikace není propojená s náramkem. Spusťte aplikaci.

6. Synchronizace dat.

Spusťte aplikaci a spárujte s náramkem. Vyberte Download data from server v nastavení. Pokud synchronizace nefunguje vypněte a zapněte mobil a znovu spárujte s náramkem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, pláštěů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídít reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.cz
reklamacie@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: